






######

Step2 ルート証明書の登録

エクステンジは、様々な機器と、3Beesのアプリを結ぶ製品です。患者様の個人情報などを安全に取り扱うため、通信の暗号化を行っています。暗号化通信を行うためには、「ルート証明書」をPC、iPadなどご利用の端末に登録する必要があります。ご利用端末のOSおよびブラウザの種類に対応した手順をご参照ください。


Chrome (Windows) をご利用の場合

1. “http://www.3bees.com/mwRootCA.pem”にアクセスします。
「mwRootCA.pem」のダウンロードが開始されますので、任意の場所に保存してください。
2. コントロールパネルから[ネットワークとインターネット]を選択します。
3. [インターネットオプション]を選択します。
4. [コンテンツ]タブを選択します。
5. [発行元]ボタンをクリックします。
6. 「信頼されたルート証明機関」が選択されていることを確認し、[インポート(I)...]ボタンをクリックします。
7. 証明書のインポートウィザード画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。
8. [参照]ボタンをクリックします。
9. ファイル選択のダイアログが表示されたら右下の[X.509 証明書 (*.cer;*.crt)]をクリックし、リストの一番下に表示されている「全てのファイル (*.*)」を選択します。
10. 1でダウンロードしたルート証明書を選択し、[開く]をクリックしたら、ウィザード画面の[次へ]をクリックします。
11. 証明書ストア画面が表示されたら、「証明書を全て次のストアに配置する(P)」を選択します。証明書ストアには「信頼されたルート証明機関」と表示されていることを確認してください。
12. [次へ]をクリックすると確認画面が表示され、[完了]をクリックすると証明書の登録は完了です。

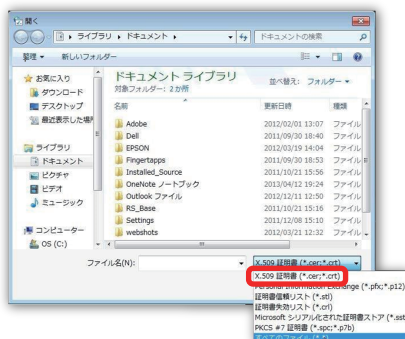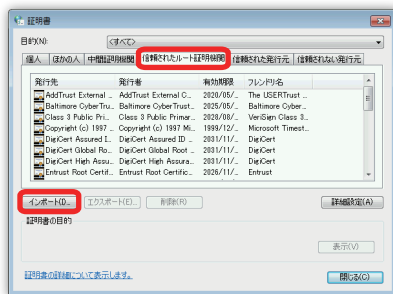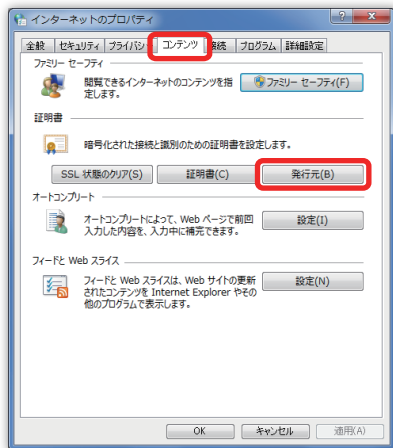

Firefox (Windows/Mac) をご利用の場合

1. “http://www.3bees.com/mwRootCA.pem” にアクセスします。
2. ダイアログボックスが表示されますので、『この認証局によるWebサイトの識別を信頼する』にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックすると、証明書の登録は完了です。

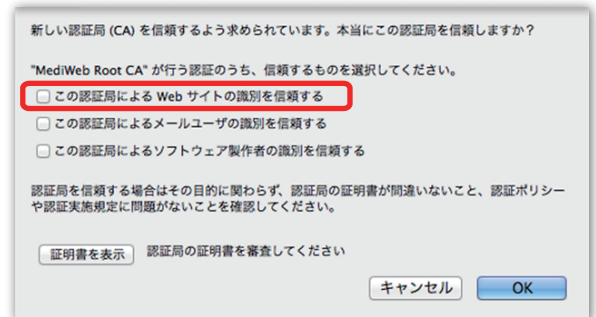

iPadをご利用の場合


1. Safariで “http://www.3bees.com/mwRootCA.pem” にアクセスします。
2. ダウンロードすると設定画面に切り替わります。
3. 設定画面で、[インストール]ボタンをタップします。
4. 警告画面が表示されますので、右上の[インストール]をタップします。
5. インストール完了画面が表示されますので、[完了]をタップして、登録は完了です。




Safari、Chrome (Mac) をご利用の場合

1. "http://www.3bees.com/mwRootCA.pem"にアクセスします。「mwRootCA.pem」のダウンロードが開始されますので、任意の場所に保存してください。

2. 保存した「mwRootCA.pem」をダブルクリックします。証明書の追加画面が表示されます。追加ボタンを押してください。

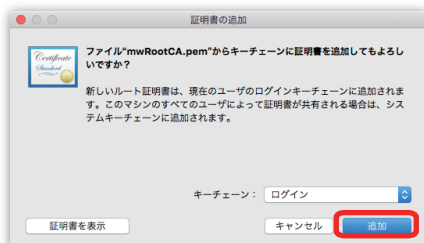


3. 続いて、キーチェーンアクセス画面が表示されますので、「MediWeb Root CA」項目を探し、ダブルクリックしてください。

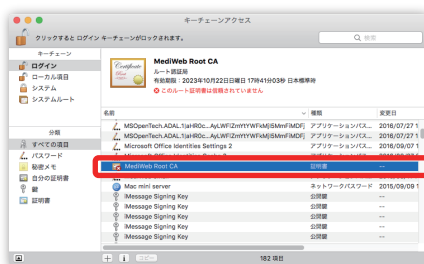

4. MediWeb Root CAの詳細画面が表示されるので、「この証明書を選択するとき」のプルダウンをクリックし、[常に信頼]を選択します。



5. Mediweb Root CAの詳細画面を閉じてください。お使いのPCのパスワード入力画面が表示されますので、PCの起動時に入力しているパスワードをご入力ください。

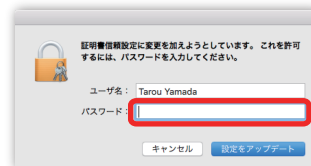

6. キーチェーンアクセスのキーチェーン「ログイン」に「MediWeb Root CA」が追加されていることが確認できれば、証明書の登録は完了です。

「ログイン」に追加されていない場合、「システム」に追加されている場合があります。その場合、「システム」から「ログイン」に「MediWeb Root CA」をドラッグアンドドロップしてください。

Step3 Beeコンパス連携の設定

エクスチェンジとBeeコンパス、およびORCAを連携するには、1.エクスチェンジで3BeesにログインしてORCAの連携設定を登録し、2.BeeコンパスにエクスチェンジのURLを登録する必要があります。以下の手順に従い設定を行ってください。

1. 3BeesにログインしてORCAの連携設定を登録する

3Beesのログイン情報をエクスチェンジの管理画面から登録します。エクスチェンジに接続できる環境下で、ブラウザでエクスチェンジに接続することで設定画面を開くことができます。ブラウザのアドレスバーに入力するIPアドレスの例) <https://192.168.1.1>

1. “3Beesログイン”の“メール”と“パスワード”に、3Bees登録時のメールアドレスとパスワードを入力してください。

2. [ログイン]ボタンをクリックして設定を保存します。

複数の施設アカウントをお持ちの場合は、使用する施設を選択するリストが表示されます。その場合、施設を選択して次へ進んでください。

3. “Beeコンパス設定”タグをクリックしてください。

4. ORCAから日報データを一時的に出力する共有フォルダーの情報を入力してください。

5. 変更ボタンを押して、連携設定を保存してください。共有フォルダーへの接続に成功すると、● 共有フォルダー ステータス：異常なし と表示され、登録は完了です。

“共有フォルダステータス”が ▲ 共有フォルダー ステータス：異常あり となっている場合は、共有フォルダーへの接続設定に誤りがあります。正しい情報を入力して、再度変更ボタンを押してください。



2. BeeコンパスにエクスチェンジのURLを登録する

Beeコンパスの基本設定を変更し、システム連携の設定でエクスチェンジのURLを登録します。

1. Beeコンパスの「基本設定」画面を開き、「システム連携の設定」ブロックの「エクスチェンジのURL」に「https://(エクスチェンジのIPアドレス)」を入力します。
例) https://192.168.1.1
2. エクスチェンジとの接続確認が行われ、通信が成功すると、[変更]ボタンの下に **ステータス：異常なし** と表示され、設定完了です。

 **ステータス：異常あり** のように表示された場合は、異常ありと表示されたボタンをクリックします。
この作業を行っても異常ありの表示が消えない場合、「こんなときは」をご確認ください。



こんなときは

電源ケーブルと接続し、電源につないでも電源インジケータが点灯しない

- ・**Step1**を参考に、再度電源ケーブルの接続をご確認ください。それでも点灯しない場合は、故障の可能性がありますので、販売店または3Beesカスタマーサポートまでご連絡ください。

エクスチェンジのIPアドレスがわからない

- ・エクスチェンジのIPアドレスは、ネットワーク環境に基づき出荷時に設定されています。IPアドレスがわからなくなったときは、3Beesカスタマーサポートまでご相談ください。

ブラウザのアドレスバーにエクスチェンジのIPアドレスを入力しても、管理画面が表示されない

- ・エクスチェンジのIPアドレスが正しいかどうかをご確認ください。IPアドレスがわからなくなったときは、3Beesカスタマーサポートまでご相談ください。
- ・上記の作業を行っても開かない場合は、販売店または3Beesカスタマーサポートまでご連絡ください。

3Beesにログインを試みると、「ログインができません」と表示される。

- ・3Beesに登録済みアカウントのログインIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。

3Beesログインのメールアドレスやパスワードが変更された

- ・必ず新たな3Beesログインのメールアドレスとパスワードを再設定してください。

エクスチェンジのIPアドレスを変更したい

- ・エクスチェンジのIPアドレスを変更する場合は、必ず事前に、販売店または3Beesカスタマーサポートまでご相談ください。

その他、不明な点や3Bees製品に対するFAQにつきましては、3Beesサポートセンターをご参照いただくか、販売店にお問い合わせください。

【3Beesサポートセンター】

<http://support.3bees.com>

<証明書の更新について>

ルート証明書の更新

エクスチェンジのIPアドレスを変更した場合、またはルート証明書の有効期限が切れた場合は、ルート証明書を更新する必要があります。

エクスチェンジのIPアドレスを変更する場合は、必ず事前に販売店にご相談ください。ルート証明書の有効期限が近く、ルート証明書の更新が必要な場合は、販売店または3Beesカスタマーサポートより事前にご連絡いたします。

- ※ オルカ、ORCAは、社団法人日本医師会の登録商標です。
- ※ Mac、iPadは、Apple Inc.の商標です。
- ※ Safariは、Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ※ Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ※ Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

製造元・お問い合わせ先

開発製造元 株式会社メディ・ウェブ

住所 東京都港区虎ノ門4-1-21 葺手第2ビル 2F
URL <http://www.mediweb.jp>

お問い合わせ 3Beesカスタマーサポート

電話 0120-388-894 (9:00~19:00 日曜祝日、年末年始を除く)
メール info@3bees.com
URL <http://www.3bees.com>

※本書の内容は、お客様に予告なく変更される場合があります。

発行：2017年6月